Life Plus, BioPlus

자연스러운 아름다움에
건강을 더하다



DVS CROSSLINKED
WITH HA FILLER

이 책자는 사내의 교육으로만
사용할 수 있는 책자입니다.

Life Plus, BioPlus

자연스러운 아름다움에
건강을 더하다

CONTENTS

Global’s BioPlus	06
BioPlus History	08
Patents & Approval	10
MDM® Tech.	14
SkinPlus-Hyal	24
Bio+Dew	26
HyalDew All	28
HyalDew Mid	30
HyalDew Fine	32
HyalDew Shine	34
DeneB Classic-H / Classic-S	36
DeneB Median / Modern	38
Kiara Reju	40
FilLip; Rosie	42



Global’s BioPlus

글로벌 바이오플러스

바이오플러스는 바이오 소재 응용 분야의 독보적인 기술과 전문성을 바탕으로 바이오 산업의 새로운 패러다임을 제시합니다. 또한 인류의 삶의 질 향상과 건강한 미래를 위해 끊임없이 도전하고 있습니다.

MDM® 기술 연구개발을 통해 완성된 바이오플러스 필러는 물론 유착방지제, 생체재료 유방보형물, 인공연골 등 다양한 바이오제품을 제조하는 등 해외시장에서 기술력을 인정받으며 빠르게 성장하고 있습니다.

Add health to natural beauty
Life Plus, BioPlus

+ 건강하고 아름다운 사회를 위해 사명을 수행합니다.
+ 고객만족을 위한 나눔과 인간경영을 추구하는 고객중심의 기업입니다.
+ 내일을 위한 새로운 가치를 창조하기 위한 노력은 계속됩니다.

70
Countries Worldwide

50%
CAGR (2018~2023)

10
Mil. syringe
Accumulated sales of fillers
(2020~2023)

43
patents
MDM tech., AUT tech.,
BMTS tech.

BioPlus History

2002

2003
- 바이오플러스 설립
- 콜라겐, 마이크로비드 필러 등 생체재료 연구

2006
- 벤처기업 인증

2013
- 대전공장 및 R&D 센터 준공

2014
- 기업부설연구소 인증
- Skinplus-HYAL® CE 승인
- HA필러 임상시험 완료(서울대병원 외)
- Skinplus-HYAL® KGMP 승인
- Skinplus-HYAL® KFDA 품목허가

2015
- HyalDew® KFDA 품목허가
- 화장품 제조업 등록

2016
- InterBlock ®(유착방지제) KGMP 승인

2017
- HyalDew® CE 승인

2019
- 유착방지제 CE 승인
- 유착방지제 임상시험 및 KFDA 허가

2020
- 성남 2공장 GMP 및 CE 승인
- 중국 하이난 프로젝트 진출(국내 유일)

2021
- 방광 조직수복용재 수출허가
- 관절 조직수복생체재료 KFDA품목허가
- 글로벌수출강소기업 선정
- 코스닥 상장

2022
- 신규 계열사와 공동 연구 개발
- 바이오의약품 사업 진출

2023
- 화장품 뷰티솔루션(Bonyx) 출시 (보닉스 LC 세럼, 보닉스 리쥬 세럼 등)

2024
- 중국, NMPA 의료기기
- gradell 승인(Bonyx)
- 음성바이오단지 준공 예정

2025

2026

바이오플러스 설립과 기초

2003 - 2007

바이오플러스 확장

2008 - 2018

글로벌 기업으로 성장

2019 -

Patents & Approval

MDM® Tech.
6 특허 / 3 출원 중



AUT
25 특허 / 6 출원 중



BMTS
12 특허 / 3 출원 중



Products approval
30여 개국 / 120여개 품목 등록





자연스러운 아름다움에
건강을 더하다

Add health to natural beauty
Life Plus, BioPlus

MDM® Tech. 기술소개

1

PART. 01

MDM® 기술의 핵심
응집력 ↑, 점탄성 ↑, 안전성 ↑

MDM® Tech.

MBMT™ (Micro Bead Monophasic Technology)	DMCT™ (Divinyl sulfone Multi-Crosslink Technology)	MDAP™ (Multiple Degree Amphiphilic Purification)
점탄성, 응집력 강화	몰딩력 및 지속성 강화	순수화 작업을 통한 안전성 확보




Existing crosslinking tech	Ultrafine bead divided by molecule of HA	New bead united by ultrafine bead	Another bead united by new bead	Safety, Effectiveness Biocompatibility, Efficacy	Completion of products

기존 BDDE 필러의 단점을 완전히 극복한 Pendent 현상 및 부작용이 없는 제조 공정



MDM Tech. 필러




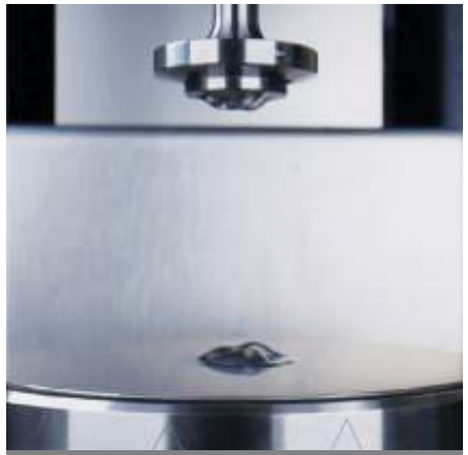



BDDE 가교 필러


- 높은 응집력 (Cohesiveness), 높은 부착력 (Adhesion)
- 높은 점탄성 (Elasticity)
- 높은 점도 (Viscosity)
- 완벽한 몰딩 (Molding ability)


PART. 01

BDDE의 한계를 극복한
DVS 가교제 사용

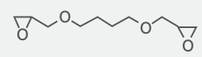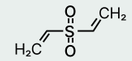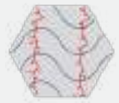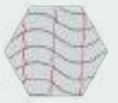Crosslinking Agent	BDDE	DVS	DVS의 장점
Chemical Name	1,4-Butanediol diglycidyl ether	Divinyl Sulfone	
Structure			분자의 길이가 짧고, 빠른 반응에 따른 조밀한 가교
Molecular Weight (Dalton)	202.25	118.15	
Molecule length (Ratio)	3 (in case)	1 (then approx. 1/3)	강한 결합력 및 치밀한 분자 구조에 따른 조밀한 가교 가능
The number of atoms forming a bridge between HA molecules	14 units (Possibility of surplus atoms↑)	5 units	
Manufacturing characteristics	Easy process Loose crosslinking	Difficult Process Dense cross-linking	어렵고 긴 공정에 따른 완전 가교
Crosslinking degree	Due to incomplete cross-linking Pendent phenomenon occurs	Complete crosslinking	
Crosslink			

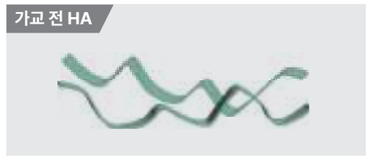


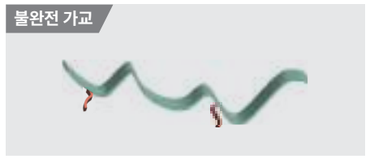

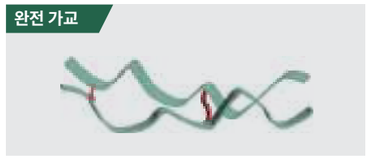

- 가교이전 HA — 유체로 적용되며, 생체 적합성은 뛰어나지만 유변학적 특성이 좋지 않음.
- 불완전 가교 — HA 사이에 가교제의 교차 결합이 되지 않은 상태를 Pendent 현상이라고 하며, 주입 후 부작용이 발생함.
- 완전 가교 — HA 사이에 가교제의 교차 결합이 되어 생체 적합성과 단단한 구조 및 분해에 저항하는 기계적 특성이 높음.


| HA와 MDM 필러의 동일 스펙트럼 검증

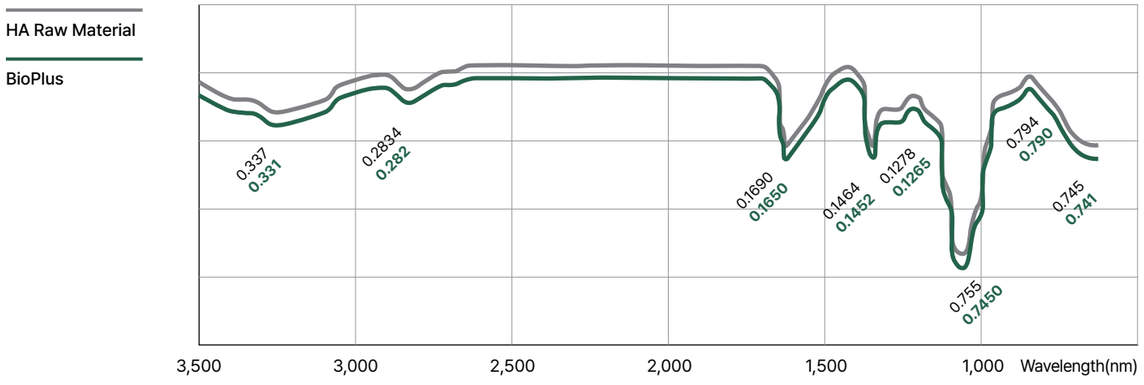

< Safety analysis via FT-IR(refractive absorbance) >


| Multiple Degree Amphiphilic Purification을 통한 DVS 잔류량 미검출

(BDDE 기준 10ppm 보다 월등 낮은 1/10,000 수준인 1ppb 이하로 관리)

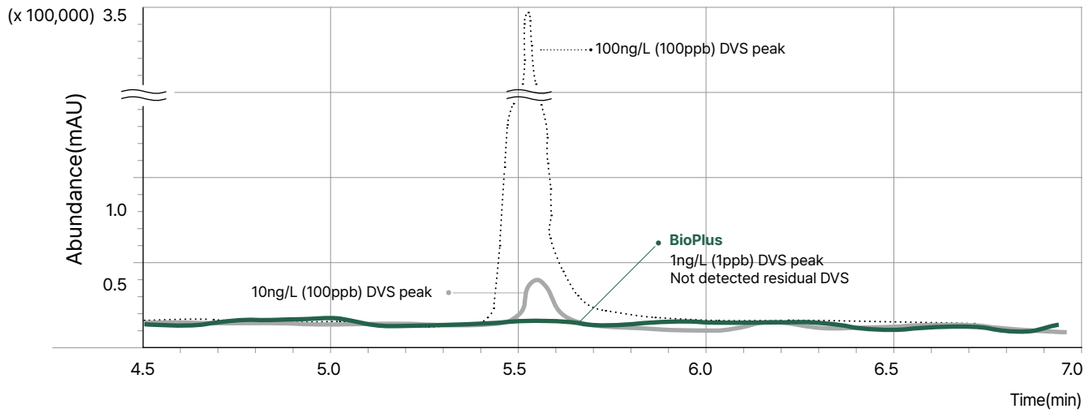


< Safety analysis via GC-Mass (DVS residual amount) >

| Mono-phasic 제조 방식을 통한 Swelling 최소화

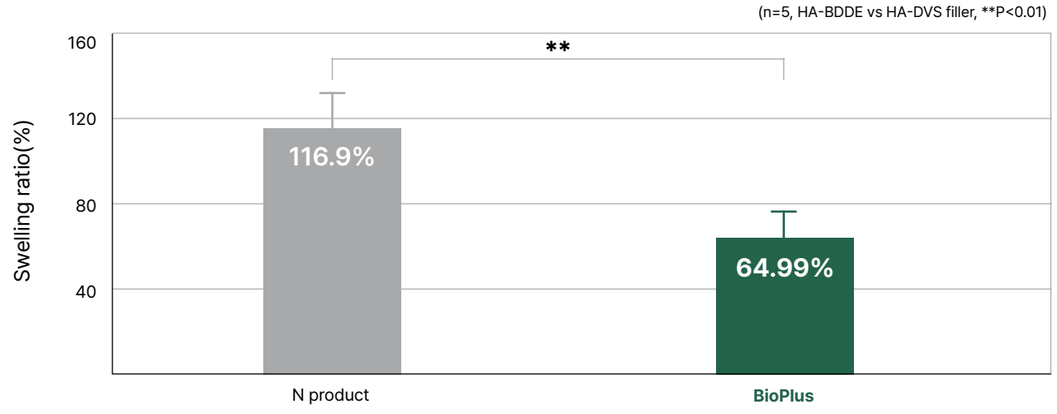

< Stability analysis through Swelling Test >

| Hyaluronidase 에 완벽한 분해

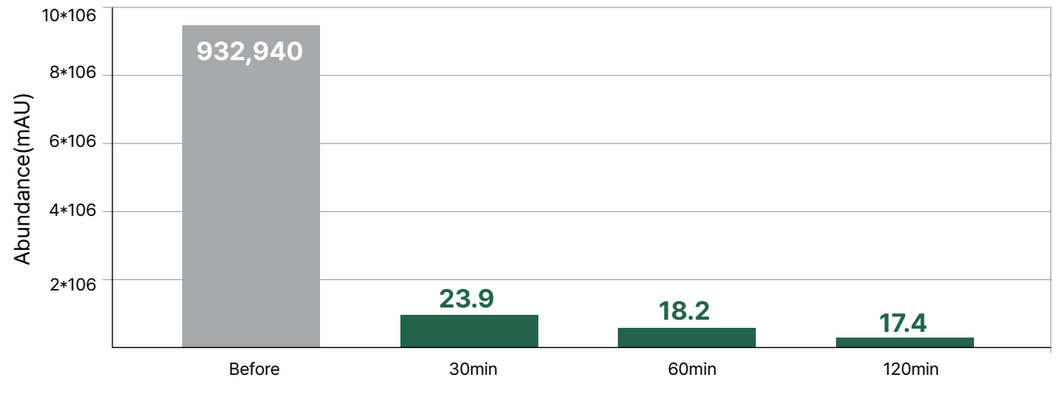

< Stability analysis through Hyaluronidase Test >

PART. 01 **바이오플러스** 필러는?

+ 다양한 등급의 **점탄성**
+ 다양한 등급의 **응집력**
+ 다양한 등급의 **지속력**
+ 다양한 등급의 **성형성**
+ 다양한 등급의 **몰딩력**
+ 다양한 등급의 **유변학적 특성**
+ 다양한 **부위 적용**



PART. 01 **다양성**

다양한 TAN Delta 값에 따른 다양한 제품군

Product(Filler)	Tan δ	Cohesiveness (N)
SkinPlus-HYAL Implant	0.06	0.9
Bio-DEW	0.07	0.8
DeneB Classic-H	0.3	0.7
DeneB Classic-S	0.4	0.5
HyalDew All	0.3	0.7
HyalDew Mid	0.4	0.5
HyalDew Fine	0.5	0.3
HyalDew Shine	0.7	0.1

* G′(Changing external forces, Elastic modules or storage modules)
* G″(Energy taken away from the outside, Loss modules)
* Tan δ = G′/G″는 탄성과 고체에 또는 액체에 가까운 필러인지를 구분하는 값



1 **안정성**

안정성을 위해 Purification 적용
(Not washing)



2 **원천 특허 기술**

원천 특허 기술을 활용한 고품질 구현



3 **부분 공정 수작업**

고품질 완성을 위한 부분 공정 수작업



4 **품질의 균일화**

소규모 작업을 통한 품질의 균일화 구현



5 **충분한 시간**

원액 제조 공정의 충분한 시간 투여

<필러의 제조 소요시간>

일반 BDDE	
1회 생산 수량	30,000개(1mL)

1 HA 원료
2 용액화
3 다단계 가교
4 세척 (washing out)
5 최종체형화 (Prefilled Syr.)

48시간 소요
48시간 소요

96 시간 소요

바이오플러스 DVS	
1회 생산 수량	2,500개(1mL)

1 HA 원료
2 용액화
3 다단계 가교
4 정제 (Purification)
5 최종체형화 (Prefilled Syr.)

168시간 소요
720시간 (부분 공정 수작업)
552시간 소요

720 시간 소요


자연스러운 아름다움에
건강을 더하다

Add health to natural beauty
Life Plus, BioPlus

PRODUCT 제품소개


2

스킨플러스-하이알®

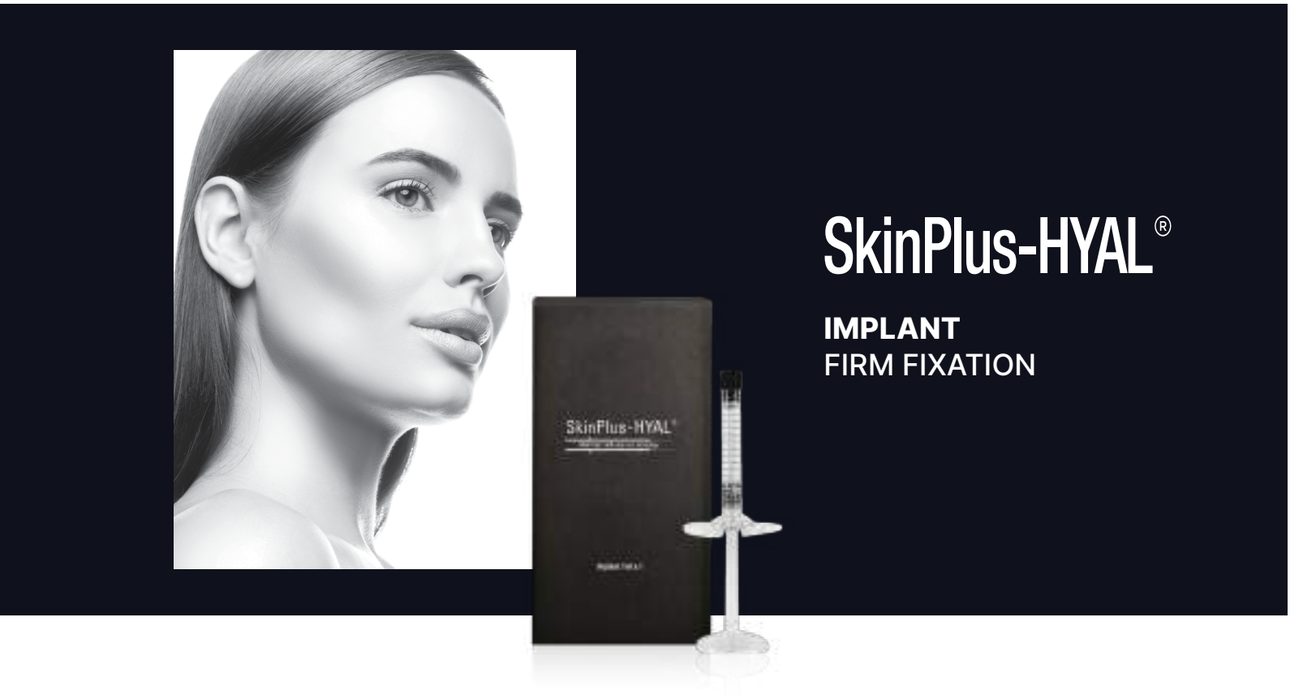

Specification

[SkinPlus-HYAL®]

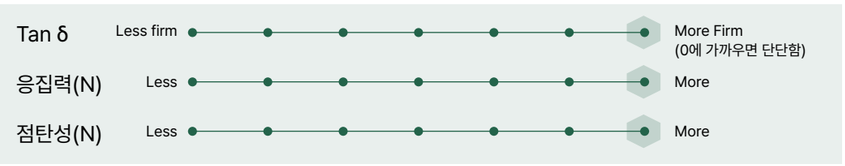

[R 제품]



* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Subcutaneous to periosteum

Key points

- 매우 하드한 타입의 필러
- 높은 compression force에 저항력 있는 필러
- 퍼짐이 적고 vertical projection이 유지되는 필러

Recommendations

1. 부드러운 코 선 및 코 끝
2. 턱선의 강화
3. 턱 주름 개선

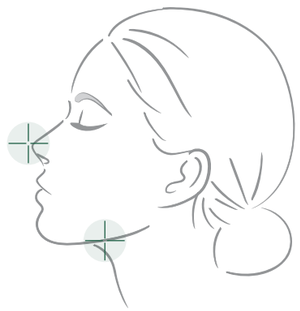

Product information

제품명	SkinPlus-HYAL Implant
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	· 25G x 13mm x 1Needle · 20G x 50mm x 1Cannula
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



Specification

[Bio+ Dew®]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Subcutaneous to periosteum

Key points

- 매우 하드한 타입의 필러
- 높은 compression force에 저항력 있는 필러
- 퍼짐이 적고 vertical projection이 유지되는 필러

Recommendations

1. 부드러운 코 선 및 코 끝
2. 턱선의 강화
3. 턱 주름 개선

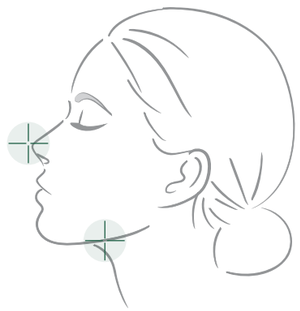

Product information

제품명	Bio+DEW
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	· 20G*50mm Cannula 1ea · 25G*13mm Needle 1ea
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



HyalDew All

Strongly Prevented
SEPARATION
and MIGRATION

Specification

[HyalDew All]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Subcutaneous to periosteum

Key points

- 일반적인 하드 타입의 필러
- 높은 Compression & Shearing forces에 저항력 있는 필러
- Separation 및 Migration에 강한 필러
- 넓은 범위의 Contouring에 매우 적합이 유지되는 필러

Recommendations

1. 이마
2. 미간 사이의 주름
3. 팔자 주름
4. Vaginal Tightening

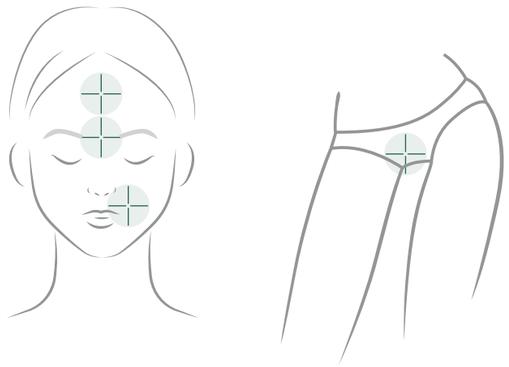

Product information

제품명	HyalDew All
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	· 27G*13mm Needle 2ea
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



HyalDew Mid

Optimization of
FACIAL CONTOURING

Specification

[HyalDew Mid]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Subcutaneous to periosteum

Key points

- 일반적인 하드 타입의 필러
- 높은 Compression & Shearing forces에 저항력 있는 필러
- Separation 및 Migration에 강한 필러
- 넓은 범위의 Contouring에 매우 적합이 유지되는 필러

Recommendations

1. 얼굴 윤곽 개선
2. 눈 밑 꺼짐
3. 볼 꺼짐을 개선
4. 귀 볼 교정
5. 발등

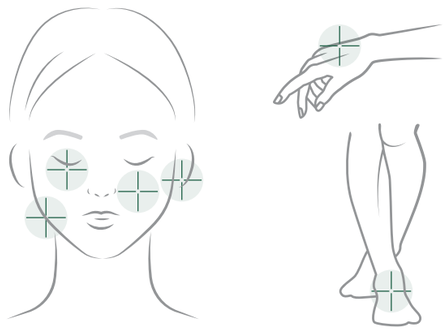

Product information

제품명	HyalDew Mid
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	· 27G*13mm Needle 2ea
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



HyalDew Fine

Optimization of
LIPS and MODERATE WRINKLES

Key points

- 소프트 타입의 필러
- 잘 퍼지며, 몰딩이 쉬움, 근육 활동이 높은 부위에 적합
- Natural volumizing에 적당


Recommendations

1. 얼굴 윤곽 개선
2. 눈 밑 꺼짐
3. 볼 꺼짐을 개선
4. 얇은 입술 개선
5. 손등



Specification

[HyalDew Fine]

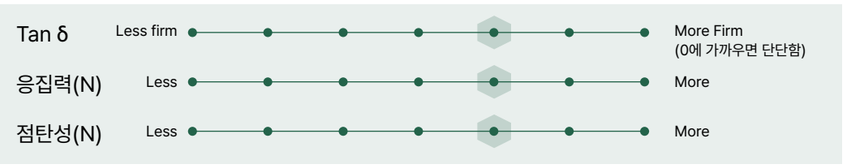

[R 제품]



* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer

Dermis to subcutaneous

Product information

제품명	HyalDew Fine
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	· 30G *13mm Needle 2ea
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

하이알듀 샤인




HyalDew Shine

Optimization of
MILD and MODERATE WRINKLES

Specification

[HyalDew Shine]

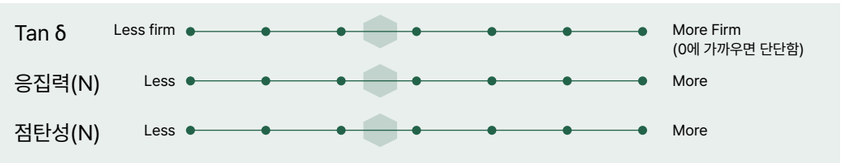

[R 제품]



* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Dermis

Key points

- 가장 소프트 타입의 필러
- 주로 Moderate Wrinkle care에 용이
- Natural spreading 용이
- 낮은 가교에 의한 HA 특유의 피부톤 개선 가능

Recommendations

1. 얼굴 미세 주름
2. 얼굴 전체 톤 업
3. 볼 꺼짐을 개선

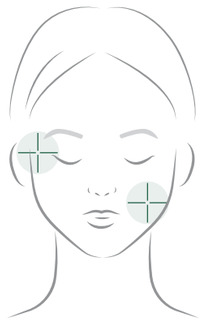

Product information

제품명	HyalDew Shine
히알루론산	20mg /ml
용량	1ml /sy
니들 종류	31G*13mm Needle 2ea
사용목적	· 가교 히알루론산을 피하에 주입하여 물리적 수복을 통해 성인의 안면부 주름을 일시적으로 개선
분류	의료기기(조직수복용생체재료)
보관온도	실온(1~25°C)
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입
제조원	바이오플러스(주)

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

데네브® Classic-H / Classic-S



DeneB Classic-H / Classic-S

Multiple usages and
LARGE CAPACITY

DeneB Classic-H


- 일반적인 하드 타입의 필러
- 높은 Compression & Shearing forces에 저항력 있는 필러
- Separation 및 Migration에 강한 필러
- 넓은 범위의 Contouring에 매우 적합이 유지되는 필러

DeneB Classic-S

- 일반적인 하드- 미드 타입의 필러
- 넓은 범위에 Contouring에 매우 적합이 유지되는 필러
- Facial contouring에 매우 적합

Recommendations

1. Chest and shoulder line
2. Breast
3. Hip Dip
4. Vaginal Tightening

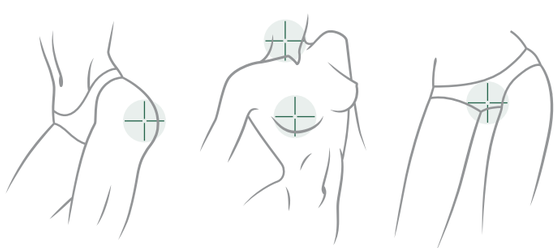

Specification

[DeneB Classic-H]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[DeneB Classic-S]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer


Subcutaneous to periosteum

Product information

제품명	DeneB Classic-H (수출용)	DeneB Classic-H (수출용)
히알루론산	20mg /ml	20mg /ml
용량	10ml /sy	10ml /sy
니들 종류	X	X
분류	의료기기(조직수복용생체재료)	
보관온도	실온(1~25°C)	
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입	
제조원	바이오플러스(주)	

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

데네브® Median / Modern

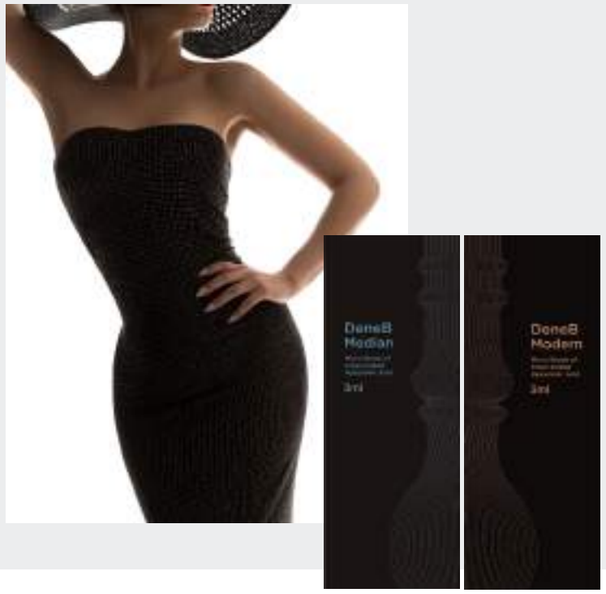

DeneB Median Modern

Multiple usages and
LARGE CAPACITY

DeneB Median


- ＋ 일반적인 하드 타입의 필러
- ＋ 높은 Compression & Shearing forces에 저항력 있는 필러
- ＋ 퍼짐이 적고 vertical projection이 유지되는필러

DeneB Modern

- ＋ 일반적인 하드 타입의 필러
- ＋ 높은 Compression & Shearing forces에 저항력 있는 필러
- ＋ Separation 및 Migration에 강한 필러
- ＋ 넓은 범위의 Contouring에 매우 적합이 유지되는 필러

Recommendations

1. Chest and shoulder line
2. Breast
3. Vaginal Tightening

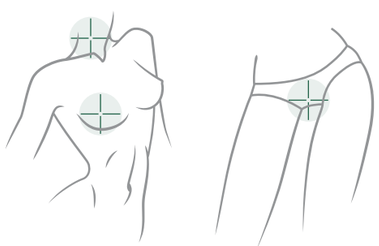

Specification

[DeneB Median]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[DeneB Modern]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

[R 제품]

Tan δ	Less firm	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	More
점탄성(N)	Less	More

* Tan δ(탄젠트 델타) = G′/G″
* G′(외부 힘의 변화; 탄성 모듈 또는 저장 모듈)
* G″(외부 힘에 뺏기는 에너지; 손실 모듈)
* BioPlus' In-house data

Skin layer

Subcutaneous to periosteum

Product information

제품명	DeneB Median	DeneB Modern
히알루론산	20mg /ml	20mg /ml
용량	3ml/sy	3ml/sy
니들 종류	X	X
분류	의료기기(조직수복용생체재료)	
보관온도	실온(1~25°C)	
사용법	· 오염되지 않도록 주입 할 위치에 맞는 주사침을 연결 반드시 진피내 주입	
제조원	바이오플러스(주)	

* CE는 Lidocaine 포함하지 않음.
* 수출용은 Lidocaine을 포함.
* 이 제품은 '의료기기'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



Kiara® Reju

Restores
VITALITY for
SKIN BOOSTER

1 MTS Roller

1) 세안 후 혼합된 바이알 얼굴 도포	3) 위아래, 수평, 사선으로 롤링
2) 0.05~0.3mm 이내 깊이 MTS roller	4) 남은 용액 도포 후1~2회 롤링

2 Manual 주입

· 니들 : 30~32G,	· 주입각 :10~15°, bevel & lifting up inj.
· 깊이 : 0.3~0.5mm 깊이	· 주입량 : 0.1mL 이내

3 Injector 주입

· 니들 : 30~32G(multi needle)	· 주입량 : 0.1mL
· 깊이 : 0.1~0.3mm	· Fast flow, Low power

4 Microneedling RF

· RF 조사 후 주입	· 깊이 : 0.1~0.3mm
· 니들 : 30~32G	· 주입량 : 0.3mL

5 HIFU, RF, IPL 등 리프팅 효과 기기

· 2주 후 피부상태를 고려하여 시술

※ 2~5번의 방법은 환자의 피부상태와 의사선생님과 상담하셔야 합니다.

Facial Diamond & V-Zone Contouring 방법으로 시술을 추천
1. 이마 부위 2. 관자놀이 3. 입술 주위, 볼 부위 4. 턱선 5. 얼굴 전체 필요한 부위

Combines the most effectivesolutions for skin, PDRN and HA

PDRN가 HA의 안정적인 배합으로 피부세포의 재생 촉진과 피부 윤택 효과를 동시에 느낄 수 있는 피부 재생 촉진 솔루션입니다.

Specification

수분 공급 및 하이드로 리프팅 | 탄력 | 모공 축소 | 피부톤 개선 | 피부결 개선

Recommendations

1) 젊은 피부결 및 건강한 피부 개선과 효과를 원하는 경우
2) 모공이 넓어지고, 피부 재생이 필요한 경우
3) 유수분 밸런스가 필요한 경우
4) 피부가 연약하고 예민한 경우
5) 피부 불균형으로 레이저 시술을 받을 수 없는 경우
6) 3주에 한번 시술, 3개월 동안 3번 이상을 추천
7) 연간 2회 정도의 시술을 추천

Key points

얼굴 전반에 유효성분의 투과성을 높이고 효과를 오랫동안 유지

Product information

제품명	Kiara Reju(수출용)
전성분	정제수, 히알루론산, 나이아신아마이드, 소듐클로라이드, 다이소듐포스페이트, 소듐포스페이트, 소듐디엔에이
용량	2.2ml x 3sy
니들 종류	X
분류	화장품
보관온도	실온보관
제조원	바이오플러스(주)

* 이 제품은 '화장품'이며 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

필립; 로지



FilLip;Rosie

Feel your
LIPS LIKE ROSIE

Specification

[Filip;Roise]

Tan δ	Less firm	●	More Firm (0에 가까우면 단단함)
응집력(N)	Less	●	More
점탄성(N)	Less	●	More

Skin layer

Dermis to subcutaneous

Product information


제품명	FilLip;Rosie
히알루론산	20mg /ml
용량	1.1ml /sy
분류	화장품
보관온도	실온(1~25°C)
제조원	바이오플러스(주)

Key points

- 소프트 타입의 겔 형태
- 잘 퍼지며, 몰딩이 쉽고 근육 활동이 높은 부위에 적합
- 자연스런 붉은색과 함께 Natural volumizing에 적합

Recommendations

1. Lip
2. Labia
3. Nipple

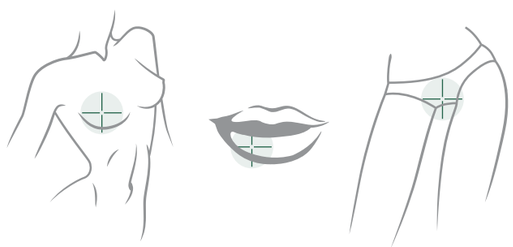

T. 82.070.7706.4437
F. 82.403.1898
E. info@ubioplus.com

비즈니스센터 서울시 송파구 정의로 8길 9 AJ 빌딩 7층 R&D 센터 서울시 송파구 정의로 8길 9 AJ 빌딩 7층
공장 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 A동 901-907호

BioPlus Co.,Ltd.